



459

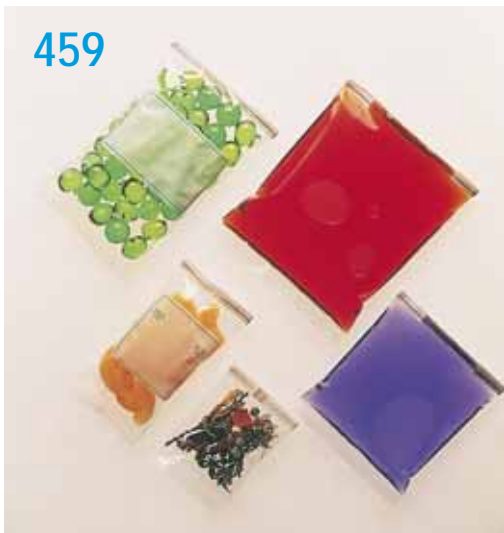

## 459. Steril plastpåse, Steribag, PE, med eller utan skrifvält

Art.nr	Volym	Längd	Bredd	Typ
459.00601	60	76	127	med skrifvält
459.01801	180	76	178	med skrifvält
459.05401	540	114	229	med skrifvält
459.07201	720	140	229	med skrifvält
459.08101	810	114	305	med skrifvält
459.00602	60	76	127	utan skrifvält
459.01802	180	76	178	utan skrifvält
459.05402	540	114	229	utan skrifvält
459.07202	720	140	229	utan skrifvält
459.08102	810	114	305	utan skrifvält

Säljes i 500 st per förpackning.

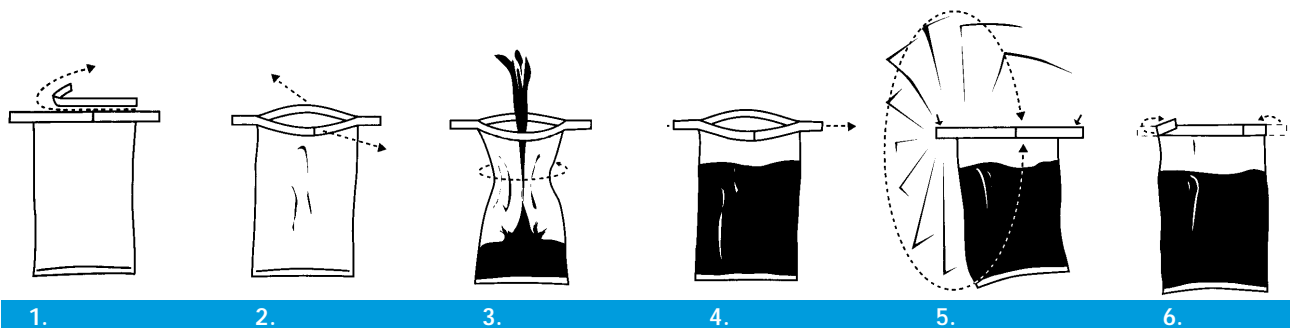

1.

Riv av den perforerade övre delen

2.

För att undvika kontamination på insidan,

3.

öppna påsen genom att dra isär med plastbanden.

4.

Greppa plastbanden i ytterändarna.

5.

Snurra påsen 3-4 varv runt plastbandet

6.

Vik plastbanden mot varandra för att åstadkomma en lufttät och läckagesäker förslutning

43

Order tel 08-581 700 55 fax 08-581 700 65